


L'CREST ボディーメンテガン

取扱説明書

HAC001G-16


- 保 管 用
- 保 証 書 付

- このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、十分にご理解いただいて、正しく安全にお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名及び購買シール」などの記入を確かめ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

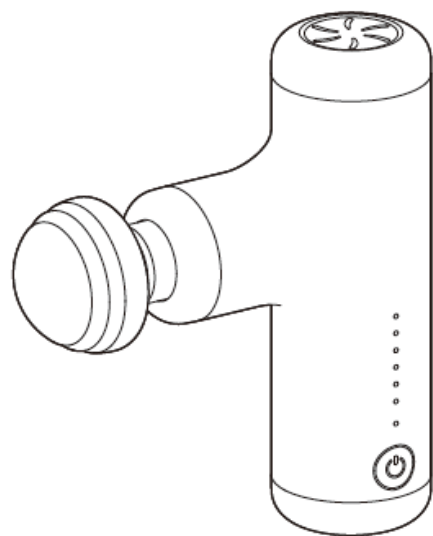

各部の名称

■ 本体

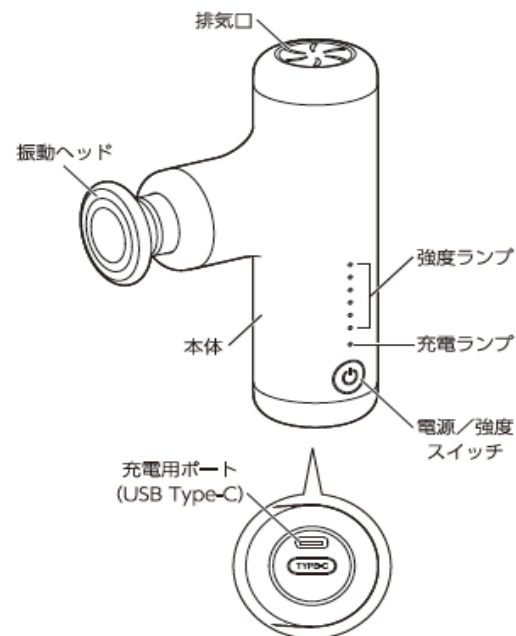


■ アタッチメント(3種)




■ 付属品

USBケーブル Type-A⇄Type-C

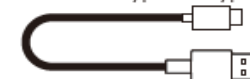

ポーチ

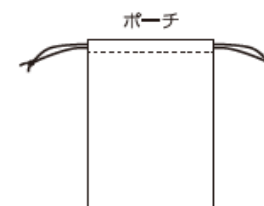


使用上の注意

- 次のような部位には使用しないでください。
頭部、腹部、胸部、首、ひじ、ひざ、背骨などの骨部
- 本製品は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。
またぬれた手で触れないでください。
- 充電中・使用中は本機が温かくなりますが、故障ではありません。
- 充電中・使用中は、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。ラジオやテレビから離して使用してください。
- 充電用のケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- 充電は、環境温度 5 ～ 30℃ の範囲で行ってください。

使いかた

■ 充電


- 付属のUSBケーブルで、本体底部の充電用USB Type-Cポートを、コンセントに接続したACアダプターなどに接続してください。

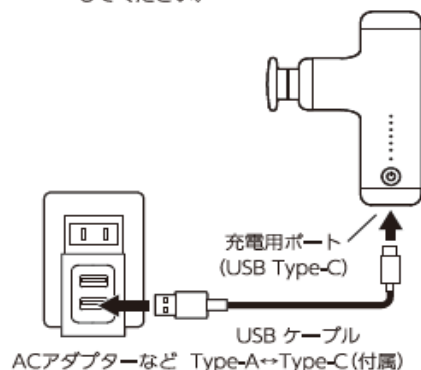

- 充電中は電源ランプが赤く点滅します。満充電になると、緑の点灯に変わります。
 - 使用中に電源ランプが赤く点灯したら、充電してください。
- ※ 本製品はUSB PDには対応していないため、USB Type-C⇔Type-Cケーブルでは充電できません。


■ 使用するとき

1 使用するアタッチメントを振動ヘッドにかぶせる

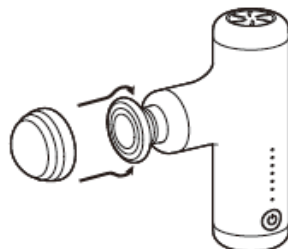


2 電源ボタンを長押しする

- 最弱の振動で運転が始まります。

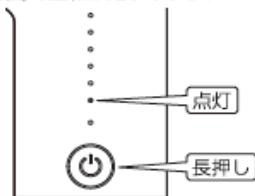

3 電源ボタンを短く押して振動の速さを選ぶ

- 電源ボタンを押すたびに、振動の速さが次のようになります。

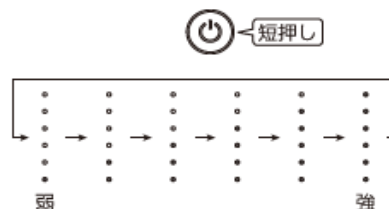

4 ハンドルを持ち、ヘッドを適切な部位に当てる

- ヘッドを当てる力によって、振動数が変わります。



- ※ 約10分間使用すると、運転が終了します。続けて使用するとき、再度電源を入れてください。


■ 終了するときは

1 電源ボタンを長押しして、運転を停止する



- ランプが消灯します。

2 アタッチメントを、軽くねじるように引っ張って取り外す

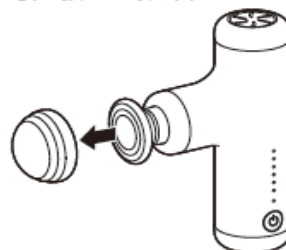

お手入れと保管

■ お手入れ

- 汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ヘッドは取り外すことができます。取り付け軸の汚れは拭き取ってください。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、十分に充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- 保管は、0 ~ 40℃で、ほこりや湿気のない場所にしてください。
- 子どもの手の届かないところで保管してください。

■ 廃棄

- リチウムイオン電池は大切な資源です。リサイクルに出してください。
- 本製品をリサイクルに出すときは、電氣を使い切って、充電量を0にしてください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

安全上の注意

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



しなければならないことを示す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



- 電池の液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災やけがの原因になります。



- USBケーブル以外で充電しない
- USB以外の電源から充電しない
- 高温になる場所、直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない
- 水につけたり、ぬれた手で触らない
- 雨の中や水のかかるところで使用しない
- 本機の電池を、本体から取り出したり他の機器に使用しない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 電池の液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止する
 - ・ 煙が出ている、異臭がする
 - ・ 内部に水や異物が入った
 - ・ 落としたり、破損したりした
発熱・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 電池の液がもれたときは使用しない
引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。
皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 次のような方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
 - ・ 医療用電子機器（ペースメーカー・人工心肺など）を使用している方
 - ・ 治療中の方・病気療養中の方・薬を服用中の方・妊娠中の方
 - ・ 皮膚疾患のある方・アレルギー疾患のある方
 - ・ 骨折・骨粗相症・捻挫・肉離れなど疼痛性疾患のある方
 - ・ その他の疾病・発熱・体調不良などのある方
 ペースメーカーや疾患に影響を与える可能性があります。

- 使用中に体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師の診察を受ける
健康被害の原因になります。

- 本製品を使用するときは、腕時計やアクセサリー類を外す
けがの原因になります。

- 本製品は、必ず手に持って使用する
本製品に乗ったり、座ったり、何かに取り付けて使用したりしないでください。
けがの原因になります。



- ほこりが多い場所、高温多湿の場所での、使用・充電・放置をしない
火災の原因になります。

- 子供に使用させたり、子供に遊ばせない
- 本製品について、機能・操作などが理解できない方に使わせない
- 他の機器と同時に使用しない
- 付属のアタッチメント以外使用しない
- 本製品のアタッチメントを他の機器に使用しない
事故・けが・体調不良の原因になります。

- 次のようなときは使用しない
 - ・ 疲労が激しいとき
 - ・ 睡眠中・食事中・入浴直後
 - ・ 発熱のあるとき
 - ・ 気温が特に高いとき、低いとき
健康被害の原因になります。

故障かな？と思ったときに

修理を依頼される前に、次の項目を点検してください。

状態	原因	処理
充電されない。 充電接続してもランプが点灯しない。	USBケーブルが本機の充電端子に確実に差し込まれていない。	USBケーブルを充電端子に確実に差し込んでください。
	USBケーブルがUSB電源のポートに確実に差し込まれていない。	USBケーブルをUSB電源のポートに確実に差し込んでください。
	USBケーブル Type-C ↔ Type-C で接続している。	本製品はUSB PDには対応していません。USBケーブル Type-A ↔ Type-C (付属) を使用してください。
運転しない。	電池残量がない。	USBケーブルで充電してください。
	充電中である。	電源に接続されている間は、ボタンを押しても動作しません。充電ケーブルを抜いてください。
充電しても運転時間が短い。	室温が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがある。	5 ～ 30℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。

※ 上に記載されている処理をしても改善されないときは、販売店に修理をご依頼ください。

仕様

振動数	60Hz以下
定格消費電力	15W
定格電圧	7.4V
バッテリー容量	1300mAh
入力電圧/電流	5V/1A
動作時間(1回あたり)	10分
寸法(アタッチメントなし)	38×128×90mm
質量(アタッチメントなし)	256g

推奨ACアダプター：DC 5V、2.1A

⚠ 警告：DC 5V以外のものは、使用しないでください。

ボディシェイプガン HAC001G-16 保証書【保証期間／お買い上げ日より6か月(半年)】

無料修理規定

- 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、その他一切の工事費用などは適用外となります。
 - 保証期間内でも、次のような場合は保証対象外となります。
(1) 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の移動・輸送・引越・落下などによる故障及び損傷
(3) 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変・公害及び異常電圧による故障・損傷
(4) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
(5) 本書の提示がない場合
(6) 本書に、販売店名・お買い上げ年月日を証明するものが添付されていない場合、あるいはその字句が書き換えられている場合
 - 本書は、付属品及び消耗品には適用されません。
 - 本書は、日本国内においてのみ適用されます。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
 - この保証書は、本書に明示された条件・期間において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。修理ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆ お客様お問い合わせ窓口における個人情報取り扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきますその記録を残すことがありますが、個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲で開示する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は、販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの(販売店レシートや証明書)が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので、必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理を受けられる場合には、商品(本体・付属品)と保証書(販売店レシートや証明書を添付したもの)をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	ボディメンテガン HAC001G-16	JAN	4920501833845	お買い上げ 年月日	年 月 日
----	------------------------	-----	---------------	--------------	-------

レシートを貼り付けてください。
保証書として保管してください。

株式会社コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel : 025-371-4805

Made in China